

Sådan bruger du dit forstøverapparat

Et forstøverapparat forstøver flydende medicin, så du kan indånde den og få den dybt ned i lungerne. Tucker bruger sit forstøverapparat, når han er hjemme sammen med Sami. Husk at have en voksen til at hjælpe dig med at bruge og rengøre dit forstøverapparat.

Klargøring



1 Still kompressoren på et bord.



2 Sæt kompressoren i en stikkontakt.



3 Sæt den ene ende af slangen til medicinbeholderen og den anden ende til kompressoren.

Sådan tager du medicinen




4 Fyld medicinbeholderen med din medicin.

5 Tænd kompressoren, og kontroller, at der kommer en støvsky ud af mundstykket.



6 Sæt dig op. Tag mundstykket i munden, og træk langsomt vejret ind og ud. Når du bruger maske, kan du trække vejret på samme måde.

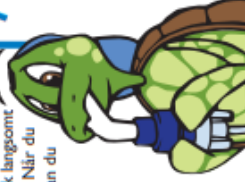

7 Når forstøveren begynder at lyde, som om den hoster, er behandlingen slut. Sluk kompressoren.



Rengøring af kompressoren

- 1 Tag kompressoren ud af stikkontakt for rengøring.
- 2 Kontroller filteret en gang om ugen, og udskift det, hvis det er snavset.



- 3 Tør kompressoren af udvendigt med en fugtig klud en gang om måneden.



- 4 Opbevares et tørt og sikkert sted.

Rengøring af forstøveren

- 1 Tag slangen af, og skil forstøversættet ad, hver gang du har brugt den.
 - En gang om ugen skal du koge alle dele (ikke slangen eller ansigtsmasken) i vand med 2-3 dråber opvaskemiddel i 10 minutter.
- 2 Vask forstøversættets dele i varmt sæbevand.
- 3 Skyl den med rent vand, og lad den lufttørre.

